



Urineonderzoek - Zo vult u de vacuüm buis met urine

Van uw behandelend arts heeft u voor het onderzoek van de urine één of meer buizen en een potje ontvangen. Het potje kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine. In de deksel van het potje bevindt zich een naald. Wanneer de buizen met behulp van de naald worden aangesloten op het potje, vullen deze zich met urine. De buizen zijn vacuüm-buizen, ze mogen niet geopend worden!


WEES VOORZICHTIG MET DE NAALD IN DE DEKSEL!

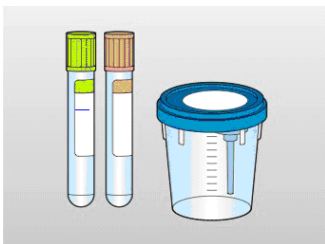

Er zijn verschillende buizen voor verschillende onderzoeken. Buizen met een groene dop bevatten een conserveremiddel, te herkennen aan het witte tablet.

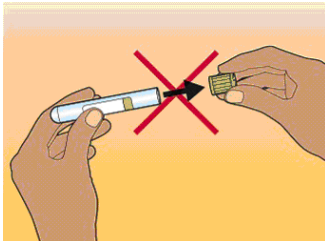


De dop **NOOIT** van de buis afhalen. De buis is vacuüm en na verwijdering van de dop is de buis niet meer bruikbaar.

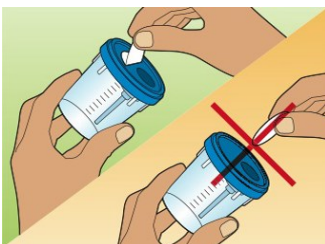

De beschermende sticker op de deksel van het urinepotje niet verwijderen, totdat daar om gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing!




Ga **NOOIT** met een vinger of voorwerp in de opening van de deksel. Hierin bevindt zich een scherpe naald!

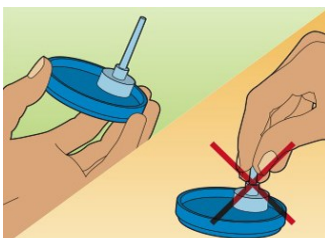


Raak het uitstekende deel van de deksel niet aan!


Zo gaat u te werk

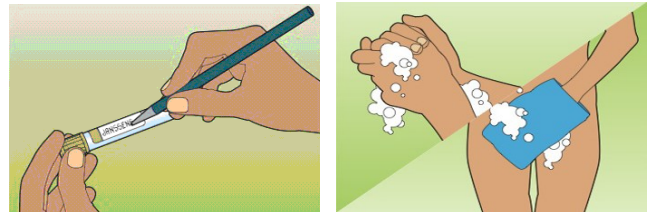

- Schrijf duidelijk en in blokletters op elke buis die u hebt gekregen: uw naam; uw geboortedatum; de datum waarop u de urine hebt verzameld.
- Was uw handen en vervolgens de geslachtsdelen. Zeepresten goed wegspoelen.

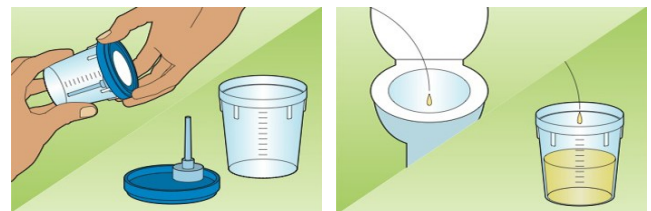


- Open het potje en leg de deksel terzijde met het uitstekende deel omhoog gericht. Raak het uitstekende deel **niet** aan!
- Laat het eerste deel van de urine (bij voorkeur ochtendurine) in het toilet lopen. Vang daarna de urine op in het urinepotje (**minimaal 30 ml**).

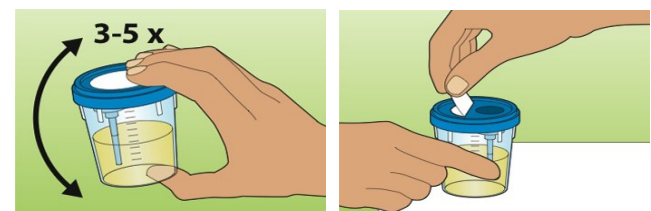

- Schroef de deksel goed sluitend op het potje, zodat deze lekdticht is. Keer het urinepotje **rustig** 3-5 maal om. U mag **niet** hard schudden.

- Zet het potje rechtop neer op een vaste ondergrond. Trek de beschermende sticker een stukje los (niet helemaal verwijderen), zodat het afnamepunt zichtbaar wordt.

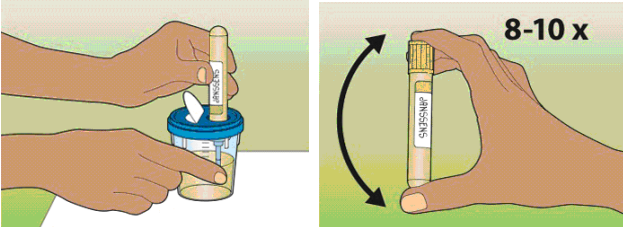

- Houd het potje vast en duw de buis **met** de dop in de opening. De naald gaat door de dop heen. Wacht tot de urine niet meer in de buis stroomt. Trek de buis uit de opening. Herhaal deze procedure voor elke buis die u hebt gekregen voor onderzoek.
- Meng de urine door elke buis **rustig** 8-10 maal om te keren. Plak de sticker terug over de opening van de deksel.



- Gooi het restant van de urine weg in het toilet. Schroef de deksel goed op het potje. Het potje kunt u daarna in de afvalcontainer werpen.
- Controleer uw gegevens op elke buis. Lever de buis (buizen) in bij Atalmedial, samen met het aanvraagformulier voor het urineonderzoek.

Algemene informatie

Aanvraagformulier

Uw behandelend arts of geeft u voor het laboratorium een aanvraagformulier mee. Vergeet dit vooral niet mee te nemen, want zonder een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier kunnen wij u helaas niet helpen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek geven wij zo snel mogelijk door aan uw behandelend arts. Hij/zij zal u van de uitslag op de hoogte brengen.

Verzekeringsgegevens en identificatie

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht uw geldige zorgpas of verzekeringsbewijs te tonen en u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Wij verzoeken u bovendien om goed te controleren of uw verzekeringsgegevens en andere informatie correct op het aanvraagformulier zijn vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan de balie van de polikliniek/het laboratorium.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met de Medische Administratie van Atalmedial op telefoonnummer 088 0037 735.

Zeer incidenteel wordt bloed of lichaamsmateriaal van patiënten gebruikt voor andere doelen, bijvoorbeeld bij de kalibratie van apparatuur en als controle-materiaal voor nieuwe analyses. Het materiaal wordt daartoe altijd eerst geanonimiseerd zodat de resultaten van onderzoek niet meer tot individuele patiënten herleidbaar zijn. U kunt hiertegen mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel of laboratoriumleiding.