



# Informatiefolder Urineonderzoek: zo vult u de buis met urine

	<h2>Algemeen</h2>
	<p>Uw behandelend arts wil uw urine laten onderzoeken. Uw arts heeft u voor het onderzoek van de urine één of meer buizen en een potje gegeven. Het potje kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine.</p> <p>In het deksel van het potje bevindt zich een naald. Wanneer de buizen met behulp van de naald worden aangesloten op het potje, vullen deze zich met urine. De buizen zijn vacuümbuizen; ze mogen niet geopend worden!</p> <p>In deze folder wordt uitgelegd hoe u vacuümbuizen met urine vult voor urineonderzoek.</p>
	<h2>Onderzoek</h2>
	<p>Algemene opmerkingen betreffende het vullen van de buizen met urine:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Er zijn verschillende buizen voor verschillende onderzoeken. Buizen met een groene dop bevatten een conserveermiddel, te herkennen aan het witte tablet.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Haal de dop <b>NOOIT</b> van de buis af. De buis is vacuüm en na verwijdering van de dop is de buis niet meer bruikbaar.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Verwijder de beschermende sticker op het deksel van het urinepotje niet, totdat daar om gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing.</p> </div> </div>



Ga **NOOIT** met een vinger of voorwerp in de opening van het deksel. Hierin bevindt zich een scherpe naald.



Raak het uitstekende deel van het deksel niet aan.



## Waar en wanneer

U kunt uw urine (uitgevuld in de buis/buizen, voorzien van uw gegevens) inleveren op alle locaties van Atalmedial. Voor locaties en openingstijden: zie [www.atalmedial.nl](http://www.atalmedial.nl).

### LET OP:


Voor urinesedimentonderzoek en onderzoek naar dysmorphe erythrocyten moet uw urine binnen een uur onderzocht worden.

Dit betekent dat urineproductie voor deze twee onderzoeken gedaan moet worden op de locatie waar u de urine inlevert. Zie hiervoor de specifieke informatiefolders.



## Vorbereitung (vanuit huis/thuis/eigen vorbereitung)

Hieronder staan de stappen om de vacuümbuis met urine te vullen uitgelegd:

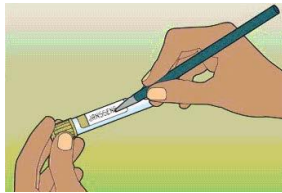

Schrijf duidelijk en in blokletters op elke buis die u gekregen heeft: uw naam, uw geboortedatum en de datum en tijd waarop u de urine heeft verzameld.



Was uw handen en vervolgens de geslachtsdelen. Spoel zeepresten goed weg.



Open het potje en leg het deksel terzijde met het uitstekende deel omhoog gericht. Raak het uitstekende deel niet aan!



Laat het eerste deel van de urine (bij voorkeur ochtendurine) in het toilet lopen. Vang daarna de urine op in het urinepotje (minimaal 30 ml).




Schroef het deksel goed sluitend op het potje, zodat dit lekdicht is. Keer het urinepotje rustig 3 tot 5 maal om. U mag niet hard schudden.



Zet het potje rechtop neer op een vaste ondergrond. Trek de beschermende sticker een stukje los (niet helemaal verwijderen), zodat het afnamepunt zichtbaar wordt.



Houd het potje vast en duw de buis met de dop in de opening. De naald gaat door de dop heen. Wacht tot de urine niet meer in de buis stroomt. Trek de buis uit de opening. Herhaal deze procedure voor elke buis die u heeft gekregen.

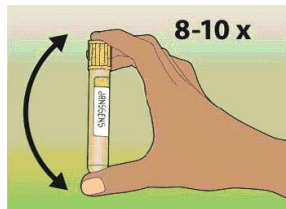

Meng de urine door de buis rustig 8 tot 10 maal om te keren. Plak de sticker terug over de opening van het deksel.






Gooi de rest van de urine weg in het toilet. Schroef het deksel goed op het potje. Gooi het potje daarna in de afvalcontainer.

Controleer uw gegevens op elke buis.  
Lever de buis (buizen) in bij Atalmedial, samen met het aanvraagformulier voor het urineonderzoek

## Dieet

Afhankelijk van het urineonderzoek dat aangevraagd is, moet u al dan niet een dieet volgen.  
Zie hiervoor de specifieke informatiefolders.

	<h2>Uitslag</h2>
	<p>Wij geven de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk door aan uw arts. Uw arts zal u van de uitslag op de hoogte brengen.</p>
	<h2>Wat neem ik mee?</h2>
	<p>Uw arts geeft u voor het laboratorium een aanvraagformulier mee. Vergeet dit vooral niet mee te nemen, want zonder een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier kunnen wij u helaas niet helpen.</p> <p>Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht uw geldig(e) zorgpas of verzekeringsbewijs te tonen en u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument of een geldige identiteitskaart.</p> <p>Wij verzoeken u bovendien om goed te controleren of uw verzekeringsgegevens en andere informatie correct op het aanvraagformulier zijn vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan de balie van de polikliniek/het laboratorium.</p>
	<h2>Meer informatie</h2>
	<p>Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur contact opnemen met de medische administratie van Atalmedial op telefoonnummer 088 0037 735.</p>
	<p><i>Zeer incidenteel wordt bloed of ander lichaamsmateriaal van patiënten gebruikt voor andere onderzoeksdoelen, bijvoorbeeld voor de kalibratie van apparatuur of als controlemateriaal voor nieuwe analyses. Dit materiaal wordt daartoe altijd eerst geanonimiseerd zodat de resultaten van dergelijk onderzoek niet meer tot individuele patiënten herleidbaar zijn. U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken tegen dit gebruik van uw bloed of lichaamsmateriaal bij het laboratoriumpersoneel of de laboratoriumleiding.</i></p>